

PURELAB® Dispenser

Uninterrupted Discovery



Bewährte Zuverlässigkeit

Einzigartiges Design für beispiellose Wasserreinheit, Flexibilität und mühelose Bedienung. In Verbindung mit PURELAB® Chorus & Quest bietet der PURELAB® Dispenser eine nahtlose Integration in Ihre Forschungsprozesse.



Präzision:

Flexible Wasserentnahme durch einen intuitiv bedienbaren Hand- Dispenser.

- Qualitätsüberwachung direkt am Entnahmepunkt
- Auto-Volumen-Entnahme
- Steigerung der Effizienz im Labor
- Reproduzierbare Ergebnisse

Platzsparendes Design:

- Minimierte Stellfläche
- Vielfältige Platzierungsmöglichkeit
- Bis zu 4 Dispenser pro PURELAB® Laborwassersystem*

*Abhängig vom erworbenen PURELAB Laborwassersystem

Maximale Flexibilität



Einfache Bedienung und Wartung:

- Plug-and-Play-Installation mit PURELAB® Laborwassersystemen
- Höhenverstellbar, um 180° schwenkbarer Arm und flexibler Hand-Dispenser
- Hand-Dispenser mit Menü-Navigation; Schutzklasse IPX7
- Optionaler Anschluss an Point-of-use (POU) Filter als optionales Zubehör

Effizient

- Anpassbare Entnahmegeschwindigkeit: Entnahme variabler Fließraten von tropfenweise bis Dauerentnahme bis zu 2 l/min
- Variable Fließrate zum leichteren Füllen verschiedener Laborgefäße
- Die automatische Entnahme definierbarer Volumen lässt Anwender mehr Zeit für andere Aufgaben
- Entnahmepprofile und die Auto-Volumen-Entnahme ermöglichen die Auswahl der gewünschten Wassermenge und verhindern versehentliches Überlaufen

Produkt- spezifikationen

Höhe
580 mm -
805 mm

Tiefe
375 mm

Breite
264 mm


Intuitiv bedienbarer Hand-Dispenser

Mehrere Entnahme-Optionen

Point-of-Use-Filter

Höhenverstellung

Drehbarer Dispenserarm

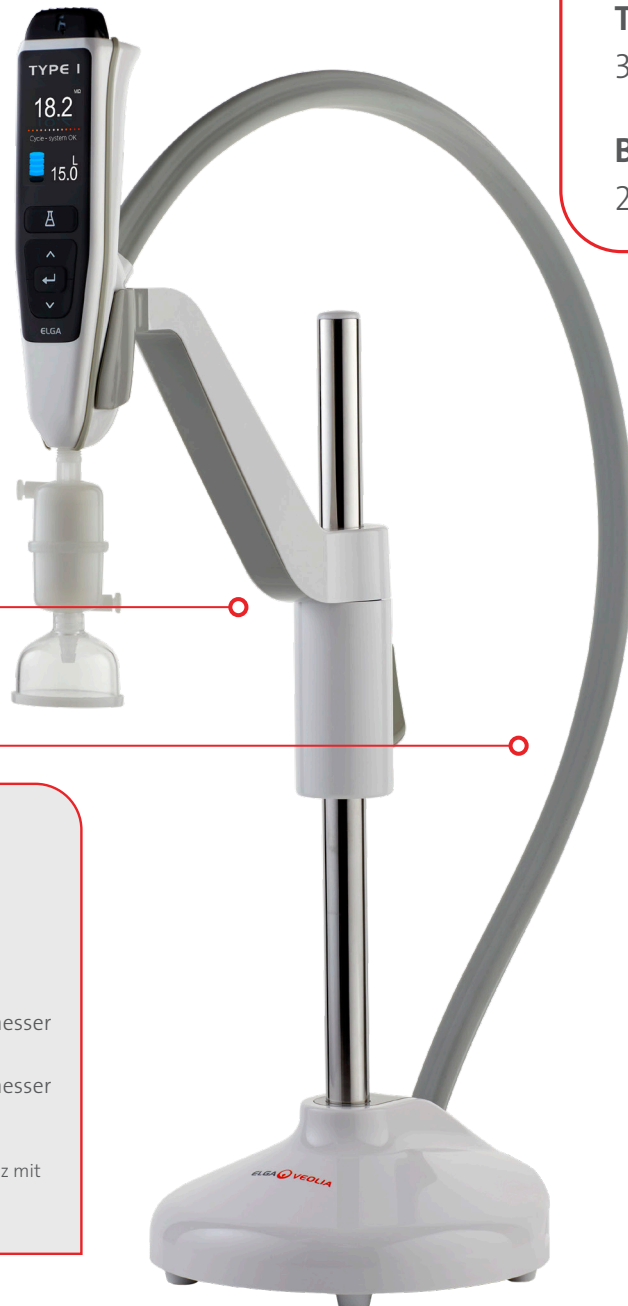

Versandgewicht: 7,7 kg

Betriebsgewicht: 4,5 kg

Installation: Freistehend auf einer Arbeitsfläche oder zusätzlich mit einer optionalen Halterung befestigt. (Details siehe Kurzanleitung)

Netzspannung

100–240 V AC, 50–60 Hz

Betriebsspannung

24 V DC

Leistungsaufnahme

120 VA

Geräuschemission

dBA - < 40

Vorlauf

8 mm Außendurchmesser

Rücklauf

8 mm Außendurchmesser

Winkelklemmen

8 mm

(im Basisinstallationsatz mit dem Gerät enthalten)

Dedicated to Discovery

Wir bei ELGA sind Spezialisten für die Entwicklung, Installation und dem Kundenservice von Laborwasser Systemen.

Unser unübertroffenes Produktdesign ist international anerkannt und ausgezeichnet.

Unsere Serviceteams auf der ganzen Welt unterstützen Wissenschaft und Gesundheitswesen mit ihrer speziellen Expertise.

Weltweit verfügbare Datenerfassung und IoT mit Hubgrade ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Kunden werden durch unsere weltweite Lieferkette und regionale Zentren auf allen Kontinenten versorgt und unterstützt.

ELGA gehört zur Veolia Gruppe, dem weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Wasser-, Entsorgungs- und Ressourcenmanagement.

ELGA in Deutschland

Veolia Water Technologies Deutschland GmbH

ELGA LabWater

Telefon: +49 (0) 51 41 803 0

Telefax: +49 (0) 51 41 803 384

Email: vertrieb.vwt.de@veolia.com

de.elgalabwater.com